




LAN

Long Alliantie Nederland

Naam: _____

Datum: _____

Instructeur: _____

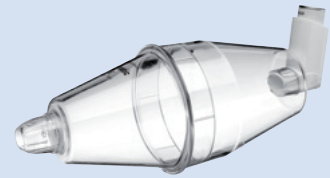

Inhalatieprotocol dosisaërosol met Volumatic® (voor kinderen)

Vanaf leeftijd 4 jaar

Patiënteninformatie

1. Bespreek het doel en de werking van de medicatie.

Vorbereiding

Voor het eerste gebruik:

2. De Volumatic® voor het eerste gebruik afwassen (zie kopje schoonmaken).
 3. Verwijder de beschermdop van de dosisaërosol.
 4. Krachtig schudden en 3 doses wegsputen.

Voor elk gebruik:

5. Verwijder de beschermdop van de dosisaërosol.
 6. Langer dan 1 week niet gebruikt: krachtig schudden en 1 dosis wegsputen.
 7. De mond moet leeg zijn.
 8. Zet de Volumatic® in elkaar.
 9. Controleer de werking van de klep (bij het schudden van de Volumatic® moet de klep goed hoorbaar zijn).
 10. Schud de dosisaërosol krachtig.
 11. Plaats de dosisaërosol met de opening naar beneden en recht vooruit in de Volumatic®.
 12. De dosisaërosol met Volumatic® is nu klaar voor gebruik.

De inhalatie

13. Laat het kind rechtop zitten of staan, het hoofd iets achterover.
 14. Houd de Volumatic® horizontaal en plaats het mondstuk tussen de tanden, laat het kind de lippen eromheen sluiten. Zorg dat de uitstroomopeningen vrij blijven.
 15. – Laat het kind, indien mogelijk, volledig uitademen.
– Druk de dosisaërosol 1 keer in bij het begin van de inademing.
– **Laat het kind 10 keer rustig in- en uitademen** door de Volumatic®, de klep moet hoorbaar open en dicht gaan.
 16. Indien meerdere doseringen per keer zijn voorgeschreven, de dosisaërosol uit de Volumatic® halen en herhalen vanaf punt 10. Spuit nooit meer dan één dosis tegelijk in de Volumatic®.
 17. Verwijder de dosisaërosol van de Volumatic®. Plaats de beschermdop van de dosisaërosol terug op de dosisaërosol.
 18. Na inhalatie de mond en keel spoelen: het eerste slokje gorgelen en uitspugen, het tweede slokje door slikken of indien dit niet mogelijk is iets eten of drinken.




LAN

Long Alliantie Nederland

Naam: _____

Datum: _____

Instructeur: _____

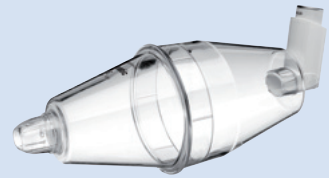

Schoonmaken

- 19. Volumatic® één maal per week schoonmaken.
- 20. Haal de Volumatic® uit elkaar.
- 21. Was de onderdelen in een lauw en schoon afwassopje.
- 22. De Volumatic® niet afspoelen, niet afdrogen.
- 23. Laat de Volumatic® aan de lucht drogen.
- 24. Zorg ervoor dat de onderdelen goed droog zijn alvorens u de Volumatic® weer in elkaar zet.

Aandachtspunten

- 25. Bereken wanneer de dosisaërosol leeg is. Op de zijkant van de dosisaërosol staat hoeveel doses erin zitten. Turf de doses en noteer de datum van aanbreken. Sommige dosisaërosolen hebben een teller.
- 26. Bewaar de dosisaërosol op kamertemperatuur.
- 27. De Volumatic® eenmaal per jaar vervangen.

Tenslotte

- 28. Verwijs naar www.inhalatorgebruik.nl voor een passende instructiefilm en gebruiksaanwijzingen voor kind en ouders.